

## 工作头快速操作指南



1. 将纸尿裤放置于工作头外壳底座上，纸尿裤大孔在下，上方小孔露出螺丝，对准工作头，下方露出所示两个小孔。




2. 按图所示将工作头主体略微倾斜放入工作头外壳底座上，将工作头主体底部向下按压到底。



3. 将工作头主体与外壳后方卡扣顺时针拧紧。



4. 将安装完成后的工作头底部的魔术贴与包裤U型槽内魔术贴对齐粘贴。

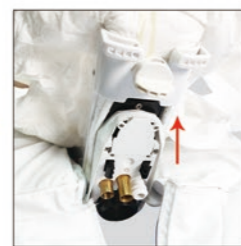

5. 将裤套上的松紧带向上拉扣于工作头后方凹槽内。



6. 确认安装完成后将软管接头与工作头底部连接固定好，以听见“咔嗒”声为对接成功。



7. 将工作头和包裤置于使用者臀部后面，并将工作头、包裤居中和使用者臀部贴合，将使用者回正，穿戴好。



8. 工作头穿戴完毕后，需将大腿内侧的两边纸尿裤向外轻拉整理好，使纸尿裤与皮肤紧密贴合，不可有缝隙，调整好工作头位置，将包裤上片与腰带粘合即可。

### 操作注意事项

#### 1、清洁大便过程中如有使用问题或个体问题偶尔导致的冲洗不干净现象，处理方法：

- ①需在手动模式按“清洗”键进行多次大便冲洗处理过程；
- ②打开穿戴好的包裤，用刷子清洁工作头上的大便并手动操作机器“清洗”键进行工作头清洗，清洗干净后再重新穿戴好工作头或拆卸下工作头进行洗刷清洁。

#### 2、如遇侧漏问题做以下处理：

- ①确认使用人体型是否偏瘦，根据体型选择适合的纸尿裤穿戴；
- ②检查包裤、纸尿裤、工作头穿戴是否贴身；如有穿戴不贴身请重新穿戴；
- ③使用过程需平躺卧床，大小便时侧卧不超过30度；
- ④如有少量侧漏可操作机器手动模式下进行烘干。

## 纸尿裤安装检验标准




(图一)

纸尿裤夹压太多容易导致安装困难；慢慢拉扯至标准效果（见图二）



(图二)

调整纸尿裤后效果，侧面效果见（图三）

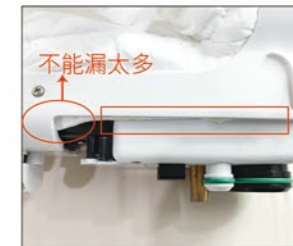

(图三)

侧面外漏不能太多；大部分处于与塑料壳接近靠齐。



(图四)


正确装配后，防水膜应大部分在外面。

## 工作头与人体穿戴检验标准




(图一)

穿戴时要领：纸尿裤需与人体大腿内贴合，不用太紧但需要贴合皮肤，没有贴合则会导致抽污压力下降，大便不能完全抽走，同时也会引起侧漏。

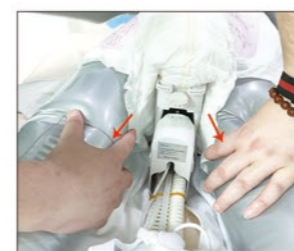


(图二)

穿戴时在贴上魔术贴之前，检查工作头两侧纸尿裤是否夹入内部，两侧均需要用手轻轻往外拉扯。如没有轻微拉扯易导致抽污压力下降，且小便感应不良。

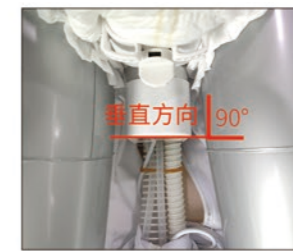

(图三)

穿戴后需检验工作头接头是否垂直。

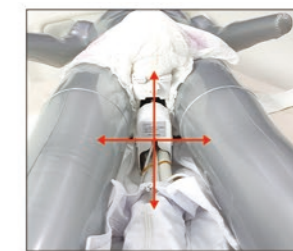

(图四)

穿戴后检验工作头是否在中心位置，自垂直向下。



(图五)

穿戴后需检查线管从两腿中间延伸至床尾，避免腿部或重物压住管道。